


5 L Ambulansflaska, MEDICINSK OXYGEN AGA. Lägre vikt i ambulansen.

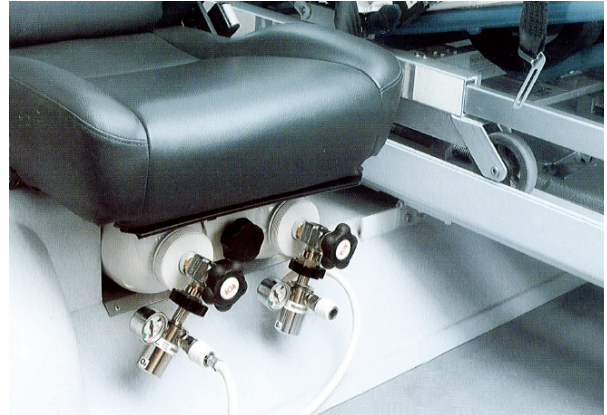

Lägre vikt och bättre arbetsmiljö

5 L Ambulansflaska är en lättviktsflaska i aluminium särskilt framtagen för ambulanser. Jämfört med 5 liters stålflaska bidrar lättviktsflaskan till en lägre totalvikt i ambulansen. Lättviktsflaskan bidrar också till en bättre arbetsmiljö. Den låga vikten gör dem enklare att hantera - inte minst i trånga utrymmen. 5 L Ambulansflaska MEDICINSK OXYGEN AGA passar i HANDYPACK och PACKBOX och får plats under vårdarsätet i de flesta ambulansmodeller.

Underhåll och spårbarhet

Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med elektroniskt chip och etikett på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

Lättviktsflaska i aluminium
Ventil utan tryckregulator med DIN 6 gänga (W 21,80 x 1/14), höger utvändig enligt Nordisk standard

Tekniska data	Flaskstorlek	5,0 liter
	Nominellt innehåll	1000 liter
	Material	Aluminiumflaska
	Diameter	Ca 14 cm
	Höjd inkl. ventil	Ca 57 cm
	Totalvikt inkl. gas	Ca 6,8 kg
	Ventil	Ventil utan tryckregulator
	Max fyllningstryck	200 bar
	Standard ventil	ISO 10297
	Användningstemperatur	-20°C till +45°C
	Förvarings-/transporttemperatur	-40°C till +65°C
	Linde Healthcare artikelnummer	111088

Övrigt Restgasventil, RPV (Residual Pressure Valve)
Flaskan har plan botten

Vänd dig till oss Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.