


HemLOX® Liberator. Mobilt system för medicinsk oxygen.

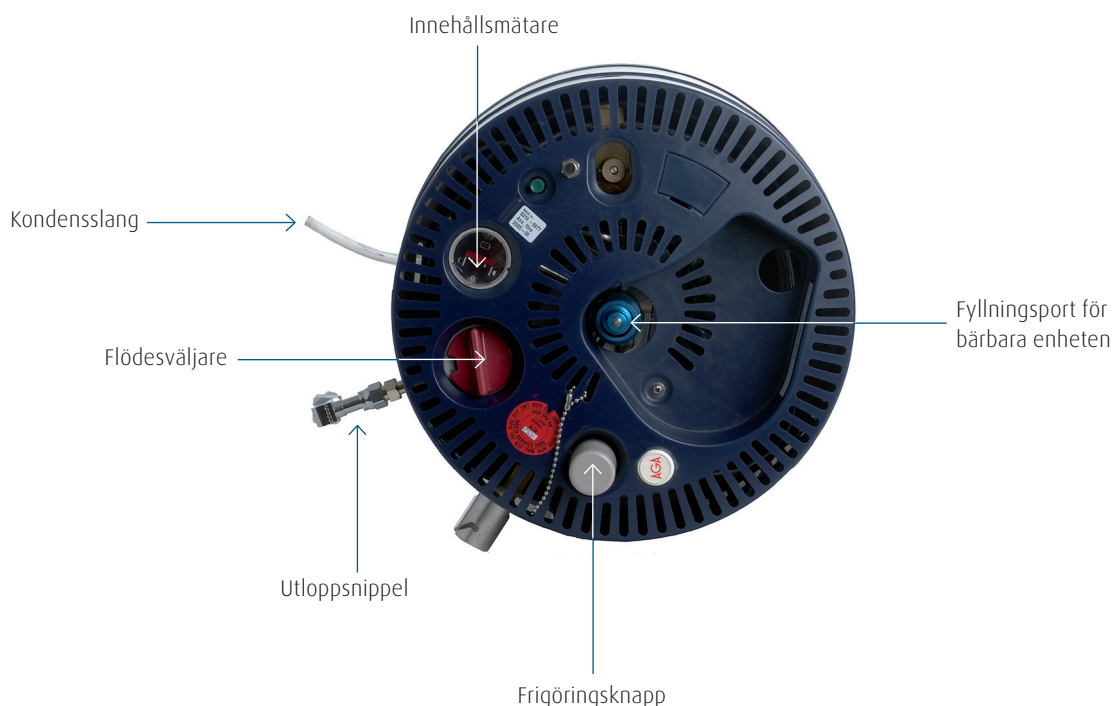

Produktbeskrivning

HemLOX® innebär att Linde Healthcare tar totala ansvaret för leverans av flytande medicinsk oxygen för säker och effektiv oxygenbehandling i hemmet. Linde Healthcare producerar, fyller och analyserar flytande medicinsk oxygen enligt Svensk Läkemedelsstandard och under överinseende av Läkemedelsverket. Linde Healthcare ansvarar också för service och underhåll av behållarna.

Kompakt förrådskank

I HemLOX®-systemet ingår ett större stationärt kärl som Linde Healthcare levererar hem till patienten och byter ut regelbundet till ett nyfyllt kärl. Vanlig standard vuxen/barn gramma kan användas. Det stationära kärlet används i hemmet, men för mobila patienter finns även mobila termosar.

Exakt innehållsmätare

Utrustningen kräver ingen elanslutning och arbetar ljudlöst. Den elektroniska innehållsvisaren indikerar noggrant hur mycket oxygen som finns kvar. Flödet regleras i fasta steg mellan 0,25 liter/min och 6 liter/min.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

Tekniska data

Volym (vätska)	20 liter	30 liter
Volym (gas)	17500 liter	25000 liter
Vikt (fylld)	39,9 kg	53,5 kg
Vikt (tom)	17,7 kg	20,4 kg
Dimension	Höjd exkl. hjulsats 622 mm/Höjd inkl. hjulsats 722 mm/ Diameter 356 mm	Höjd exkl. hjulsats 750 mm/Höjd inkl. hjulsats 850 mm/ Diameter 356 mm
Arbetsstryck	1,4 bar	1,4 bar
Normal avkokning (gas)	502 liter/dygn	502 liter/dygn
Maximal användningstid*	Inställd på 2 liter/min: 6 dygn vid 20 andetag per minut	Inställd på 2 liter/min: 8,6 dygn vid 20 andetag per minut
Nivåindikator	Elektronisk indikator	Elektronisk indikator
Flödesinställning liter/min	0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0	
Apotekets varunummer	023 281	023 273
Linde Healthcares artikelnummer	107 603	107 604
Användningsområde	+70 till -20°C	+70 till -20°C
Klassificeras enligt MDD	93/42/EC, tillägg 2007/47/EC, Appendix II	

*) Baserat på kontinuerlig förbrukning



AGA Gas AB

Linde Healthcare, 181 81 Lidingö

Telefon: +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se