


MediFlow® Ultra

Produktbeskrivning

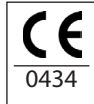

Mediflow® Ultra är en ny flödesväljare med extra funktioner vilka gör det lättare för användaren att fullt ut kontrollera syrgasbehandlingen.

En speciell funktion hos Mediflow® Ultra är den inbyggda regulatorn vilken ger ett stabilt och exakt flöde, oberoende av trycket i det medicinska centralgassystemet. Flödet justeras via en lättillgänglig handvred som är monterad på framsidan. Den nya flödeskontrolltekniken har en förbättrad funktion vid val av flöde och garanterar ett kontinuerligt flöde till patienten, även om handvreden mot all förmodan skulle hamna mellan två flödesinställningar. Det specialdesignade fönstret gör att flödet går att avläsa både från sidan och framifrån.

Utrustningens kompakta design möjliggör:

- snabb anslutning till gaskällan
- snabb och enkel montering av tillbehör
- lättare tillgänglighet till annan monterad utrustning

Tre varianter av justerbart flöde täcker behovet för de flesta typer av behandling med medicinsk syrgas och andningsluft (0-2, 0-6 och 0-25 l/min).

Mediflow® Ultras egenskaper är baserad på standarden ISO EN 10524-4.

Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Funktioner och prestanda

Ingående tryck	2.8 till 8 Bar	Maximalt utgående tryck 2,3 Bar utan flöde
Flödessteg (12 lägen)	0 till 2 l/min 0 till 6 l/min 0 till 25 l/min	0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 25
Inloppsanslutning	Enligt respektive lands standard	
Utloppsanslutning	G3/8"	
Material	Flödesdel: nickelpläterad mässing – PA Regulatorhus: nickelpläterad aluminium	
Dimensioner / vikt	Diameter: 37 mm. Längd: 71mm (utan tätstycke). Vikt: 347 g (0728101).	
Artikelnummer	Fråga lokalt GCE-kontor om tillgängliga varianter anpassade till aktuell nationell standard.	
Tillverkningsinformation	GCE s.r.o, Zizkova 381, 583 81 Chotebor, Czech Republic Tel.: (+420) 569 661 111 - Fax: (+420) 569 661 107 www.gcegroupp.com	
Regulatorisk status	Följer Medicintekniska Direktivet 93/42/EEC. Klass IIa	

Artikelnummer	Artikelnummer	Benämning	Gas	Ingående tryck	FLV	Flödesutlopp	Inlopp
	321407	MEDIFLOW ULTRA II, O ₂ , 25, QC, S, G3/8	O ₂	2,8-8	0-25	Slangnippel	QC
	321619	MEDIFLOW ULTRA II, O ₂ , 6, QC, S, G3/8	O ₂	2,8-8	0-6	Slangnippel	QC
	0728103	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 6, RM, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-6	Slangnippel	RM (r)
	0728104	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 25, RM, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-25	Slangnippel	RM (r)
	321409	MEDIFLOW ULTRA II, O ₂ , 2, QC, S, G3/8	O ₂	2,8-8	0-2	Slangnippel	QC
	0728106	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 25, CL, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-25	Slangnippel	CL (r)
	0728147	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 25, RM, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-25	Slangnippel	RM (v)
	0728152	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 25, CL, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-25	Slangnippel	CL (v)
	0728157	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 6, RM, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-6	Slangnippel	RM (v)
	0728160	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 6, CL, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-6	Slangnippel	CL (r)
	0728163	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 6, CL, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-6	Slangnippel	CL (v)
	0728166	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 2, RM, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-2	Slangnippel	RM (r)
	0728169	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 2, RM, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-2	Slangnippel	RM (v)
	0728172	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 2, CL, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-2	Slangnippel	CL (r)
	0728175	MEDIFLOW ULTRA II O ₂ , 2, CL, 1M, G3/8	O ₂	2,8-8	0-2	Slangnippel	CL (v)

O₂=Oxygen

FLV=Flödesväljarens flödesområde i liter per minut

S=Skandinavisk standard på snabbkopplingen

G3/8=Rak 3/8"-gänga

QC=Snabbkoppling, hane

CL=Klämma att montera på skena

RM=Monterad på skena, platta att

montera på skensystem

(r/v) = Rak/vinklad

In order to guarantee a continuous technical development GCE reserve the right to make alterations in design and specification without prior notice.

För att säkerställa kontinuerlig teknisk utveckling, förbehåller sig GCE rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Manufactured by:
GCE Norden AB
Box 21044
SE-200 21 Malmö
Sweden

Produktbeskrivning
700 325 825