


QI Engineering Equipment. AVS Unit, lättåtkomlig avstängning av medicinska gaser.

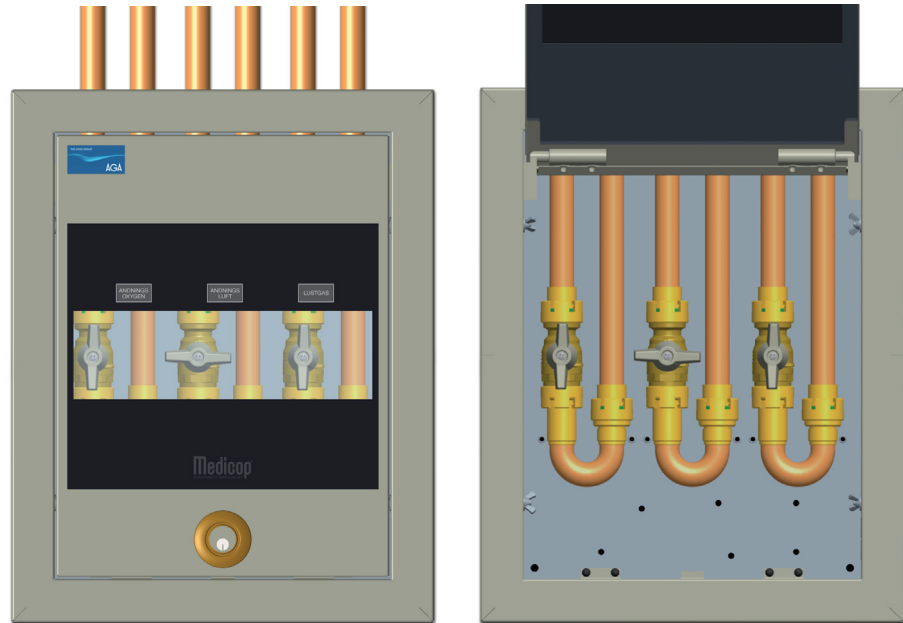

Quality Improvement. QI står för Quality Improvement. QI Engineering Equipment är en mycket viktig del för helheten i försörjningssystemet för medicinska gaser. Den säkerställer att läkemedlet medicinsk gas når patienten säkert, utan avbrott i enlighet med gällande krav och regler avseende kvalitet.

Lättåtkomlig avstängning. AVS Unit installeras på vårdavdelningen och för lättåtkomlig snabb avstängning av de medicinska gaserna av en begränsad del i det centrala gasförsörjningssystemet vid t ex en nödsituation.

Modern design. Designad för dagens vårdmiljö.

Blockering av flöde. AVS Unit levereras med särskilda brickor för att fysiskt blockera flödet av gas vid t ex provtryckning av enheten efter underhåll av t ex avstängningsventiler eller tryckprovning av rörledningsnätet. Blockering av flödet är även möjligt när en gas tillfälligt inte ska användas på avdelningen för att förhindra att gasen slås på av misstag.

Tekniska data. Max drifttryck 16 bar

Rördimension 22 mm (DN20)

AVS1	1 gas	Oxygen
AVS2	2 gaser	Oxygen, Andningsluft
AVS3	3 gaser	Oxygen, Andningsluft, Lustgas
AVS4	4 gaser	Oxygen, Andningsluft, Lustgas, Instrumentluft
AVS5	5 gaser	Oxygen, Andningsluft, Lustgas, Instrumentluft, Koldioxid

Dimensioner (mm)	Infällt montage		Utanpåliggande montage	
	1-3 gaser	4-5 gaser	1-3 gaser	4-5 gaser
Bredd:	315	500	385	560
Höjd:	415	415	485	485
Djup:	95	95	100	100

Utanpåliggande eller infällt montage.

CE-märkt enligt ISO7396-1.

Vänd dig till oss. Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.

Kontaktuppgifter.

Linde Healthcare

AGA Gas AB, 181 81 Lidingö

Tel: 08-731 18 00, www.linde-healthcare.se