

THE LINDE GROUP

AGA

MEDICINSK OXYGEN AGA®

Hur mycket gas finns i flaskan  
och hur länge räcker den?



AGA Gas AB

Linde Healthcare • 181 81 Lidingö • Tfn 08-731 10 00


Kundcenter: Tfn 08-731 18 00 • lhkundcenter@se.aga.com

[www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)

# MEDICINSK OXYGEN AGA® är ett registrerat läkemedel

Storlek	Tryck	1 l/min	2 l/min	5 l/min	10 l/min	15 l/min	25 l/min
2,5 liter	200 bar	8 t 9 min	4 t 4 min	1 t 37 min	48 min	32 min	19 min
	100 bar	3 t 58 min	1 t 59 min	47 min	23 min	15 min	9 min
	50 bar	1 t 54 min	56 min	22 min	11 min	7 min	4 min
3 liter	200 bar	9 t 46 min	4 t 53 min	1 t 57 min	58 min	39 min	23 min
	100 bar	4 t 46 min	2 t 23 min	57 min	28 min	19 min	11 min
	50 bar	2 t 16 min	1 t 8 min	27 min	13 min	9 min	5 min
5 liter	200 bar	16 t 17 min	8 t 9 min	3 t 15 min	1 t 37 min	1 t 5 min	39 min
	100 bar	7 t 57 min	3 t 58 min	1 t 35 min	47 min	31 min	19 min
	50 bar	3 t 47 min	1 t 54 min	45 min	22 min	15 min	9 min

OBS! Regulatorns funktion förhindrar att gas kan tas ut när flasktrycket understiger 4,5 bar. Se till att det finns säkerhetsmarginal för byte till ny gasflaska.

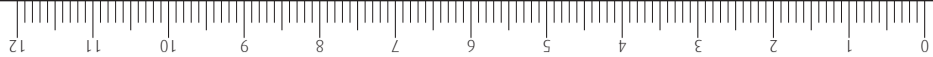

MED-970 - 2009-05 - 5.000 ex

# AGA

THE LINDE GROUP